

ZLC 设备与实验手册

设备配置/加载 / 相机读出原理 / 标定与结果对象 / 实验流程

devices 层契约、camera capture/readout 教程
(sitemap/thresholds/detect)、TrapCalibration、虚拟后端与完整实验循环

2026-06-14

Contents

1	写给新读者	1
1.1	为什么单独一本设备与实验手册	1
1.2	三种后端, 同一套 notebook 接口	1
2	设备配置与加载	3
2.1	配置就是一个字典	3
2.2	load_devices 与 DeviceSet	3
2.3	设备注册表	4
2.4	设备契约 (四种类型)	4
3	相机采集原理	5
3.1	capture 返回什么	5
3.2	虚拟相机怎么造图	5
4	相机读出教程: 从原始图到占据	6
4.1	第一步: sitemap (定位格点中心)	6
4.2	第二步: thresholds (学亮/暗边界)	7
4.3	第三步: detect (单张图判占据)	7
4.4	检测时间扫描 (保真度 vs 曝光)	8
5	标定与结果对象	9
5.1	TrapCalibration	9
5.2	结果对象与 history	9
6	一次实验完整走一遍	10
6.1	典型 notebook 循环	10
6.2	脉冲、扫描与读出怎么衔接	10
7	离线虚拟后端	12
8	设备配置与加载 (深入)	13
8.1	设备层的文件地图	13
8.2	一份配置长什么样	13
8.2.1	最小 JSON 示例	14

8.2.2	等价的 Python dict 示例	14
8.2.3	设备之间的依赖: <code>\$device:name</code>	15
8.3	注册表: 短名到类的映射	15
8.3.1	<code>register_device_class</code> : 加入自定义设备	16
8.3.2	<code>available_device_configs</code> 与 <code>read_config</code>	16
8.4	<code>DeviceSet</code> : 一组设备的容器	16
8.4.1	三个类型化属性	16
8.4.2	字典式访问	17
8.4.3	<code>.require(name, expected_type)</code>	17
8.4.4	<code>.snapshot()</code>	17
8.5	打开与关闭的生命周期	17
8.5.1	<code>.open()</code> / <code>.close()</code> 的顺序规则	17
8.5.2	推荐的使用范式	18
8.6	设备契约: 每类设备必须提供什么	18
8.6.1	<code>BaseDevice</code> : 所有设备的公共契约	18
8.6.2	<code>CameraDevice</code> : 相机额外契约	18
8.6.3	<code>SequencerDevice</code> : 时序器额外契约	19
8.6.4	<code>TrapArrayDevice</code> : 阱阵列额外契约	19
8.7	五个时序器类: 选型决策表	19
8.7.1	选型速查	19
8.7.2	<code>RemoteSequencer</code> 的配置示例	20
8.8	编写并注册一个自定义设备	20
8.8.1	步骤一: 继承基类、实现契约方法	20
8.8.2	步骤二: 注册短名	21
8.8.3	步骤三: 在配置里使用	21
8.9	把整章串成一条最小 workflow	22
9	相机采集原理 (深入)	24
9.1	相机抽象契约: <code>base.py</code> 中的 <code>CameraDevice</code>	24
9.1.1	属性与配置	24
9.1.2	采集: <code>acquire</code> 与 <code>capture</code> 的区别	24
9.1.3	核心不变量: <code>capture</code> 只显示原始图像	25
9.2	相机与时序器的协作 (唯一协作点)	25
9.3	曝光即真值 (<code>exposure-as-truth</code>)	26
9.4	两种实现: qCMOS 真机 vs Virtual 仿真	26
9.4.1	<code>QCMOSCamera (qcmos.py)</code> : 真实硬件	26
9.4.2	<code>VirtualCamera (virtual.py)</code> : 仿真相机	27
9.4.3	<code>force_all_sites</code> 参数与 “sitemap” 遗留行为	27
9.5	一个可运行的采集示例	27
10	相机读出教程与原理 (深入)	29
10.1	总体框架: 标定一次, 探测无数次	29

10.2	第一步: site-map 标定 (找中心)	30
10.2.1	调用与返回	30
10.2.2	参数逐个解释	30
10.2.3	原理: find_site_centers 怎么找中心	31
10.2.4	位点排序: row-major / serpentine / column-major	31
10.3	第二步: thresholds 标定 (定亮暗分界)	32
10.3.1	调用与返回	32
10.3.2	原理: 从直方图到 Otsu 阈值	32
10.3.3	保真度: estimate_threshold_fidelity	33
10.4	进阶读出: PSF 加权提取 + 双高斯阈值 (Rb87)	33
10.4.1	PSF 加权提取: method="psf"	33
10.4.2	双高斯阈值: method="bimodal"	33
10.5	第三步: detect 探测 (逐发判定)	34
10.5.1	调用与返回	34
10.5.2	原理: detect_atoms 是纯阈值二分类	34
10.5.3	一致性约束: reducer 与 radius 必须匹配	34
10.6	第四步 (可选): detection_time 扫描成像时间	35
10.6.1	调用与返回	35
10.6.2	原理: 用保真度曲线挑成像时间	35
10.7	保存、加载、清除与当前标定	35
10.8	一次完整的端到端示例	36
10.9	常见失败与排查	36
11	标定结果对象与完整实验流程 (深入)	38
11.1	TrapCalibration 深入: 每个字段的含义	38
11.1.1	字段清单	38
11.1.2	方法清单	39
11.1.3	schema 与存盘格式注意事项	39
11.2	结果对象与“覆盖层不改原图”不变量	40
11.2.1	结果对象家族	40
11.2.2	关键不变量: 覆盖层永不改写原始图像	41
11.3	完整 notebook 实验流程	41
11.3.1	会话与子系统总览	41
11.3.2	configure_imaging 的四个参数	41
11.3.3	标准采集循环 (可运行)	42
11.3.4	每一步产出了什么	42
11.4	扫描配合读出: 一次扫描一帧一判定	43
11.5	排错清单	43
11.5.1	预检 (preflight) 失败	44
11.5.2	曝光错配 (exposure mismatch)	44
11.5.3	换相机后标定过期 (calibration staleness)	44

11.5.4	快速自检表	44
12	修改指南	46
12.1	我要加一台自定义设备	46
12.2	我要换标定的 reducer 或网格顺序.	46
12.3	我要改本手册.	46

1

写给新读者

1.1 为什么单独一本设备与实验手册

主手册讲系统总览，frontend 手册讲 GUI 与绘图，fpga 手册讲脉冲序列器硬件。但一台真实的中性原子实验还有一整层东西没讲清楚：**设备怎么配置和加载、相机怎么采图、原始图像怎么变成“每个格点有没有原子”、一次实验的完整流程长什么样**。这本手册专门补这一层，面向**第一次接手这套代码、想跑通一次成像 + 读出**的人。

devices/ 硬件适配器与设备契约。`base.py` (设备基类)、`registry.py` (配置加载)、`virtual.py` (离线模拟)、`qcmos.py` (真实相机)、`sequencer.py` (脉冲序列器客户端)。

core/ 纯算法与结果对象。`calibration.py` (`TrapCalibration`)、`analysis.py` (找格点、阈值、检测)、`results.py` (结果对象)。

subsystems/ 实验级能力束。`exp.readout` (读出)、`exp.timing` (时序)。

views/ 接到 frontend 的绘图适配器 (在原始图上叠格点圈)。

一个贯穿全书的不变式

`exp.camera.capture()` 只显示**原始**相机图像，永远不画格点圈或阈值叠加。格点圈、占据判定属于**读出结果** (`sitemap/detect`)，不属于相机设备。如果你在一张 `capture` 上看到了格点圈，说明把标定状态错放进了相机层。

1.2 三种后端，同一套 notebook 接口

`na.connect` 返回一个 `NeutralAtomSession`，三种典型连法**暴露完全相同的接口**，只是底层设备不同：

Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

# 1) 完全离线：虚拟相机 + 虚拟序列器 (教学、写代码、回归测试)
exp = na.connect("virtual")
```



Figure 1.1: 三种后端共享 `NeutralAtomSession` 接口。教学/回归用 `virtual`，真实实验用 `qCMOS` + 本地或远程序列器。

```
# 2) 真实硬件：控制电脑连 FPGA 电脑上的 server
exp = na.connect("remote_template",
                sequencer={"host": "192.168.0.20", "port": 18861},
                open_devices=True)
```

`session` 暴露四个子系统/设备入口：`exp.devices` (底层设备集)、`exp.camera` (采图)、`exp.timing` (脉冲/触发)、`exp.readout` (标定与占据检测)。

2

设备配置与加载

2.1 配置就是一个字典

设备由一份配置描述，可以是内置名字（"virtual"）、一个 .json 路径、或一个 Python 字典。结构是**每个设备一条** `\{type, params\}`:

设备配置 JSON

```
{
  "trap_array": { "type": "VirtualTrapArray", "params": { "grid_shape":
    ↪ [5, 7] } },
  "camera":      { "type": "VirtualCamera",    "params": { "trap_array":
    ↪ "$device:trap_array" } },
  "sequencer":   { "type": "VirtualSequencer", "params": {} }
}
```

type 设备类名（内置短名，或完整 import 路径）。

params 构造参数。"`\$device:name`" 表示**引用另一台已加载设备**（如相机引用 trap_array）。加载器按依赖顺序实例化，并检测环。

2.2 load_devices 与 DeviceSet

`na.load_devices(config)` (`registry.py`) 解析配置、按依赖顺序实例化，返回一个 `DeviceSet` 容器：

Python

```
devices = na.load_devices("virtual", open_devices=False)
devices.camera      # -> CameraDevice (带类型契约校验)
devices.sequencer    # -> SequencerDevice
devices.trap_array   # -> TrapArrayDevice
devices.snapshot()   # -> {"camera": {...}, "sequencer": {...}, ...} JSON
    ↪ 安全自省
devices.open()       # 按依赖顺序打开（相机最后开），失败时逆序回滚
```


`DeviceSet` 既是属性访问(`.camera`)也是字典访问(`devices["camera"]`); `.require(name, expected\_type)` 会校验类型契约。

2.3 设备注册表

内置设备类在 `DEVICE_CLASSES(registry.py)`: `QCMOSCamera`、`VirtualCamera`、`VirtualTrapArray`、`RuntimeSequencer`、`RemoteSequencer`、`ManualSequencer`、`VerilogSequencer`。自定义设备用 `na.register_device_class(name, cls)` 注册后即可在配置里按名字引用。

Python

```
na.available_device_configs() # 列出 configs/ 下可用配置名
na.register_device_class("MyCamera", "mypkg.devices:MyCamera")
```

2.4 设备契约 (四种类型)

所有设备继承 `BaseDevice` (`open/close/stop/snapshot`)。三个**类型化**子类是强约束 (用 `isinstance` 校验, 不是鸭子类型):

CameraDevice `exposure` 属性、`configure(exposure=...)`、`acquire(frames, sequence, sequencer) → list[np.ndarray]`、便捷的 `capture(...) → CaptureResult`、`bind_experiment(session)`。

SequencerDevice `channels`、`clock_hz`、`prepare(sequence)`、`fire(sequence=None)`;
可选 `wait_done(timeout)`、`abort()`、`set_safe_state()`。

TrapArrayDevice `n_sites`。刻意精简: 它**不**暴露相机像素坐标的格点中心 (那是标定的产物)。
`VirtualTrapArray` 额外有 `grid_shape/occupancy/render_image()/reload()`。

3

相机采集原理

3.1 capture 返回什么

`exp.camera.capture(frames=1, exposure=None, display=True)` 抓若干帧，返回一个 `CaptureResult`:

Python

```
res = exp.camera.capture(frames=1, display=True)
res.images      # list[np.ndarray], 原始 uint16 帧
res.image       # 便捷取最后一帧
res.plot        # frontend 绘图对象 (只画原始像素, 无任何叠加)
```

`capture()` 内部调 `acquire(frames, sequence, sequencer)`: 若提供了序列器, 会先把成像序列扩展到所需帧数, `prepare()` 上传、`fire()` 启动, 相机用外触发采集, 之后 `wait_done()`。这是**相机和序列器协同**的唯一入口。

曝光时间的真相来源

曝光既能在相机上设 (`camera.configure(exposure=...)`), 也写在脉冲序列里 (probe 脉冲宽度)。约定: **序列里的曝光是真相来源**; 相机应当从序列取曝光, 而不是反过来。改曝光时优先改成像序列 (`exp.timing.configure_imaging(exposure=...)`)。

3.2 虚拟相机怎么造图

`VirtualCamera` (`virtual.py`) 用 `trap_array.render_image()` 合成图: 每个被占据的格点画一个高斯 PSF, 叠泊松噪声, 按曝光与原子寿命采样。它让你**不接硬件也能跑通整条读出链路**做开发和回归。

虚拟 vs 真实的一个差异

虚拟相机在采名为“sitemap”的序列时会强制“所有格点都加载”(方便标定)。真实硬件没有这个隐藏行为——做 sitemap 时必须自己保证原子都加载好。把这条记在心里, 别被虚拟后端的“理想 sitemap”误导。

4

相机读出教程：从原始图到占据

读出分三步，每步产生一个**标定**并存进 session: **找格点 (sitemap)** -> **学阈值 (thresholds)** -> **单张检测 (detect)**。

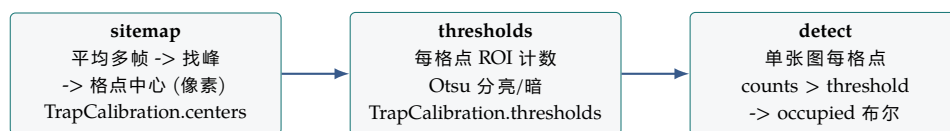


Figure 4.1: 读出三步: sitemap 定位、thresholds 学边界、detect 判占据。前两步是标定 (每次实验做一次), detect 是逐张测量。

4.1 第一步: sitemap (定位格点中心)

Python

```
sm = exp.readout.sitemap(frames=20, grid_shape=(5, 7),
    ↪ ordering="row-major",
    roi_radius=1, reducer="mean", display=True)
sm.calibration.centers # (35, 2) 每个格点的 (x, y) 像素坐标
sm.average_image      # 多帧平均图
sm.plot               # 平均图 + 格点圈叠加
```

原理 (analysis.py 的 find_site_centers): 平均所有帧 -> 高斯平滑去噪 -> 局部极大值找峰 -> 按相对阈值筛掉背景 -> 按网格顺序 (row-major / serpentine / ...) 排序, 得到稳定的 (N_sites, 2) 像素中心。**sitemap 假设所有阱都被占据**, 它是标定不是测量。

4.2 第二步: thresholds (学亮/暗边界)

Python

```
exp.readout.sitemap(frames=6, display=False)          # 必须先有 sitemap
th = exp.readout.thresholds(frames=100, site=0, display=True)
th.calibration.thresholds    # (35,) 每个格点一个 Otsu 阈值
th.counts                   # (100, 35) 每帧每格点的 ROI 计数
th.fidelity                 # 所显示格点的判别保真度估计
```

原理: 对每帧每格点取 `roi_counts` (中心周围 $N \times N$ 像素盒, 按 `reducer` 归约成一个标量计数)。把 100 次的计数直方图化, 用 `otsu_threshold` 找**最大化类间方差**的阈值, 把“暗”(0-5 计数, 背景 + 读出噪声)和“亮”(50-200 计数, 原子荧光)分开。保真度 `estimate_threshold_fidelity` 用两个正态拟合亮/暗分布、算重叠积分得到。

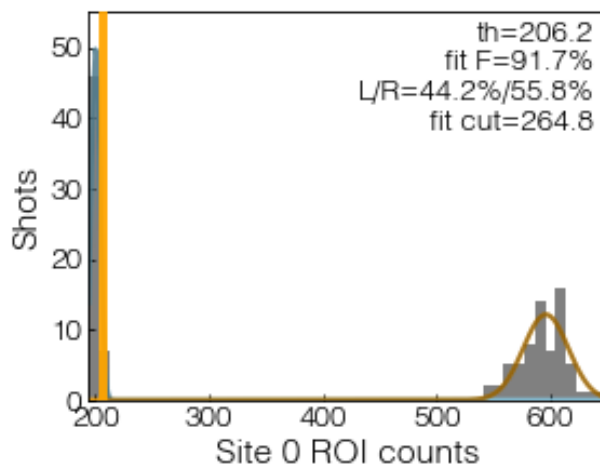


Figure 4.2: 虚拟后端**实跑**的 thresholds 标定直方图 (Site 0, 120 帧): 左峰为**暗态** (背景 + 读出噪声), 右峰为**亮态** (原子荧光), 并叠加亮/暗高斯拟合; 图中标注了 Otsu 阈值、拟合保真度与亮/暗占比。 `detect` 时把单张图每格点的 ROI 计数与该阈值逐位比较, 得占据布尔; 两峰分得越开、保真度越接近 1。本图由读出标定 `thresholds` 的 `plot_site` 直接产出, 而非示意图。

reducer 必须前后一致

阈值是**针对某个 reducer** (mean/sum/...) 学出来的。检测时若换了 reducer, 阈值就对不上。保持整次实验同一个 reducer (存在 `TrapCalibration.reducer` 里)。

4.3 第三步: detect (单张图判占据)

Python

```
det = exp.readout.detect(display=True, what="occupancy")
det.detection.occupied          # (35,) 布尔, 每格点有没有原子
det.detection.occupied_indices  # [被占据格点的下标]
det.detection.counts           # (35,) 该张图每格点的计数
det.plot                       # 原始图 + 被占据格点亮圈
```

原理 (`detect_atoms`): 取单张图每格点的 ROI 计数, 逐元素 `counts > thresholds` 得布尔

占据数组。这是[基于阈值的二元分类](#)，每张图独立判断，没有多帧贝叶斯/卡尔曼。

4.4 检测时间扫描（保真度 vs 曝光）

Python

```
scan = exp.readout.detection_time(times=[5e-6, 2e-5, 1e-4], shots=60,  
                                   live=True, display=True)  
  
scan.times          # (3,) 各检测曝光时间 (秒)  
scan.fidelities     # 每个时间点的判别保真度  
scan.stop()         # 提前停 (live 模式)
```

先在长曝光下采一组[参考](#)图建参考阈值，再对每个检测时间采 `shots` 张、算 Otsu 阈值与保真度。用它选一个“保真度已到平台”的成像时间。

5

标定与结果对象

5.1 TrapCalibration

读出三步的产物都封装在 `TrapCalibration` (`core/calibration.py`):

`centers` (`N, 2`) 格点中心像素坐标。

`thresholds` (`N, 1`) 每格点阈值 (或标量)。

`grid_shape` 阵列形状 (`ny, nx`)。

`roi_radius` ROI 半径 (计数用的像素盒大小)。

`reducer` 归约方式 `"mean"/"sum"/"median"/"max"`。

`metadata` 任意标志, 如 `\{"thresholds_calibrated": True\}`。

Python

```
path = exp.readout.save("calib.json")      # 存 .json (可读) 或 .npz (紧凑)
exp.readout.load(path)                    # 载回, 设到 exp 当前标定
exp.readout.current                       # 当前 TrapCalibration | None
exp.readout.clear()                      # 丢弃当前标定
cal = na.TrapCalibration.load("calib.json")
cal.detect(image)                        # 直接用标定检测一张图
```

5.2 结果对象与 history

每个读出/采集操作返回一个 **notebook 友好** 的结果对象 (`CaptureResult/SitemapResult/ThresholdResult/DetectionResult`), 都带一个 `.plot`, 并自动追加进 `exp.history`, 方便事后复盘与导出。

叠加是非破坏性的

格点圈是画在 matplotlib 坐标轴上的, **从不修改原始图像数组**。sitemap/detect 的 `.plot` 有圈, `capture()` 的没有——同一张原始图, 圈只是视觉层。

6

一次实验完整走一遍

6.1 典型 notebook 循环

Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

# 0) 连接 (离线先用 virtual 跑通)
exp = na.connect("virtual")

# 1) 配成像时序 (曝光是真相来源)
exp.timing.configure_imaging(exposure=2e-3, load=True)
exp.timing.preflight().raise_if_failed()          # 跑前自检: 对齐/约束

# 2) 读出标定: 定位 -> 学阈值
exp.readout.sitemap(frames=20, grid_shape=(5, 7), display=True)
exp.readout.thresholds(frames=100, display=True)
exp.readout.save("calib.json")

# 3) 单张检测
det = exp.readout.detect(display=True)
print("loaded:", det.detection.occupied_indices)

# 4) 扫描测量 (live 画图)
scan = exp.readout.detection_time(times=[5e-6, 2e-5, 1e-4], shots=60,
    ↪ live=True)
```

6.2 脉冲、扫描与读出怎么衔接

`exp.timing` 拥有当前 `PulseSequence`, 并能 `bind_pulse(pulse)` 把一个 GUI 脉冲或 `PulseTableState` 绑到序列器做扫描 (详见主手册的 N-slot 扫描模型与 fpga 手册)。一次“扫描 + 采集”的闭环: 绑定脉冲与扫描表 -> 相机 arm -> 序列器 `prepare/fire` 逐扫描点无缝迭代、每点触发一次相机 -> 逐张 `detect` -> 把每点占据/计数汇成 1D/2D 结果画出来。

有限帧 vs 自由循环

真实相机采有限帧时，应让 readout/camera helper 先 arm 相机，再生成**刚好需要帧数**的有限触发序列；不要让 qCMOS 去等一个没有帧数边界的 `repeat_forever` 自由循环脉冲（那适合示波器找线，不适合定量采集）。

7

离线虚拟后端

`na.connect("virtual")` 给你一套完全离线的 `VirtualCamera + VirtualSequencer + VirtualTrapArray`。它对写实验逻辑、回归测试、教学非常有用：整条 `sitemap/thresholds/detect/scan` 链路都能跑，不接任何硬件。`VirtualTrapArray` 可设 `occupancy`、`reload()` 重新随机装载、`render_image()` 出图。本仓库的大量测试就跑在虚拟后端上。

8

设备配置与加载（深入）

本章是给“从零开始”理解本系统设备层的人写的一份参考手册。它回答四个核心问题：一份**设备配置**长什么样、`load_devices`与**DeviceSet**如何把配置变成可用的设备对象、所有设备共同遵守的**契约** (contract) 是什么、以及在五个时序器 (sequencer) 类之间如何取舍。每一节都尽量给出可直接运行的代码片段，并标注常见错误。

8.1 设备层的文件地图

设备层全部位于 `Zou_lab_control/neutral_atom/devices/` 目录下。先建立一张文件与职责的对照表，后面各节会反复引用。

devices/base.py 定义抽象基类：`BaseDevice` 是所有设备的根，三个领域基类 `CameraDevice`、`SequencerDevice`、`TrapArrayDevice` 在其上扩展各自的领域方法。它们规定了“一个设备必须提供哪些方法”，即设备契约。

devices/registry.py 注册表与加载器。包含 `load_devices`、`DeviceSet`、`DEVICE_CLASSES`、`register_device_class`、`available_device_configs`、`read_config`。这是你与设备层打交道的主入口。

devices/virtual.py 离线模拟实现：`VirtualCamera`、`VirtualTrapArray`、`VirtualSequencer`。没有任何真实硬件时用它们跑通整条流程。

devices/qcmos.py `QCMOSCamera`，真实的 qCMOS 相机驱动封装。

devices/sequencer.py 几个真实/半真实时序器实现(`RuntimeSequencer`、`RemoteSequencer`、`ManualSequencer`、`VerilogSequencer`) 的设备层包装。

心智模型

配置（一段 JSON 或 dict）是**描述**，`load_devices` 是**工厂**，`DeviceSet` 是**已经造好、可以打开使用的一组设备**。三者层层递进：先写描述，再实例化，最后打开。

8.2 一份配置长什么样

配置可以是三种形态之一，`read_config`与`load_devices`都接受它们：

1. 字符串 `"virtual"`: 一个内置快捷方式, 等价于加载内置的全虚拟配置 (虚拟相机 + 虚拟时序器 + 虚拟阱阵列), 用于无硬件冒烟测试。
2. 一个 `.json` 文件路径: 磁盘上的配置文件。
3. 一个 Python `dict`: 在代码里直接构造的配置, 跳过磁盘。

无论哪种形态, 最终的数据结构是统一的: 顶层是一个字典, 键是**设备名** (`device_name`, 你自己取的逻辑名字, 例如 `"cam"`、`"seq"`), 值是一个描述该设备的小字典, 含两个字段:

"type" 设备类的**短名** (ClassName), 例如 `"VirtualCamera"`。短名通过 `DEVICE_CLASSES` 映射到真正的类。

"params" 传给该类构造函数的参数字典。可以为空 `\{\}`。

8.2.1 最小 JSON 示例

下面是一份完整、自治的虚拟配置。把它存成 `my_virtual.json` 即可被 `load_devices` 加载:

Python

```
{
  "trap": {
    "type": "VirtualTrapArray",
    "params": { "n_sites": 16 }
  },
  "seq": {
    "type": "VirtualSequencer",
    "params": { "channels": 62, "clock_hz": 50000000 }
  },
  "cam": {
    "type": "VirtualCamera",
    "params": { "exposure": 0.01 }
  }
}
```

注意三个键 `trap/seq/cam` 是**你取的名字**, 不是固定关键字; `DeviceSet` 会根据每个设备的**类型** (是相机/时序器/阱阵列) 自动把它归类到 `.camera/.sequencer/.trap\_array`, 而不是看名字。

8.2.2 等价的 Python dict 示例

完全相同的配置在代码里这样写, 可直接喂给 `load_devices`:

Python

```
config = {
  "trap": {"type": "VirtualTrapArray", "params": {"n_sites": 16}},
  "seq": {"type": "VirtualSequencer", "params": {"channels": 62,
                                                  "clock_hz":
                                                    ↪ 50_000_000}},
  "cam": {"type": "VirtualCamera", "params": {"exposure": 0.01}},
}

from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.registry import load_devices
```

```
devices = load_devices(config)  # 返回一个 DeviceSet
```

8.2.3 设备之间的依赖：\\${device}:name

`params` 里的某个值如果写成字符串 `"\${device}:name"`，表示“把另一个已经构造好的设备对象注入到这里”。这是设备之间互相引用的唯一机制。典型用途是让相机持有时序器的引用，或让某个组合设备依赖底层设备。

Python

```
config = {
    "seq": {"type": "VirtualSequencer", "params": {"channels": 62}},
    "cam": {
        "type": "VirtualCamera",
        "params": {
            "exposure": 0.01,
            "sequencer": "\${device}:seq"  # 注入上面那个 seq 设备对象
        }
    },
}
```

加载顺序与循环检测：`load_devices` 会分析这些 `\${device}:` 引用，按依赖顺序逐个实例化——被依赖者先建好，引用者后建。如果出现 A 依赖 B、B 又依赖 A 这样的**循环依赖**，`load_devices` 会检测出来并报错，而不是无限递归。

常见错误

- 把 `"type"` 写成全限定类路径而不是短名——除非你已经用 `register_device_class` 注册过该路径，否则应使用 `DEVICE_CLASSES` 里的短名（见下节）。
- `\${device}:name` 里的 `name` 拼错或指向一个不存在的设备键——加载会失败。
- 忘了某个 `params` 字段是设备引用，直接传了字符串字面量——只有以 `\${device}:` 为前缀的字符串才会被解析为引用。

8.3 注册表：短名到类的映射

`DEVICE_CLASSES` 是一张把**短名**映射到**实现类**的表。配置里 `"type"` 字段写的就是这些短名。内置短名包括：

QCMOSCamera 真实 qCMOS 相机 (`devices/qcmos.py`)。

VirtualCamera 离线模拟相机。

VirtualTrapArray 离线模拟阱阵列。

RuntimeSequencer 本地进程内时序器，自己编译边沿表。

RemoteSequencer 通过 RPyC 连到 FPGA 主机上 `SequencerService` 的客户端代理。

ManualSequencer 手动时序器，提示“现在手动启动 FPGA”，`fire()` 是占位空操作，用于首光调试。

VerilogSequencer 不执行而是生成 Verilog 的时序器，需要一个 `fire\_callback`。

8.3.1 register_device_class: 加入自定义设备

要把自己写的设备类接入配置系统，调用 `register_device_class(name, cls_or_path)`:

name 你要注册的短名字字符串，之后就能在配置的 `"type"` 里使用。

cls_or_path 既可以直接传类对象，也可以传一个可导入的字符串路径（让注册表在需要时再导入，避免提前加载重量级依赖）。

Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.registry import
↳ register_device_class

# 形式一：直接传类对象
register_device_class("MyCamera", MyCamera)

# 形式二：传可导入路径（延迟导入）
register_device_class("MyCamera", "my_pkg.cameras:MyCamera")
```

注册后，`"type": "MyCamera"` 就能在任何配置里使用。

8.3.2 available_device_configs 与 read_config

`available_device_configs()` 列出 `neutral_atom/configs/` 目录下随仓库附带的配置文件，目前包括 `virtual.json`、`manual_template.json`、`remote_template.json`。它返回这些可用配置，方便你在不记路径的情况下选用模板。

`read_config` 负责把“三种形态之一”的输入归一化成那个统一的顶层字典：传 `"virtual"` 时返回内置虚拟配置，传路径时读盘解析 JSON，传 dict 时原样（校验后）返回。`load_devices` 内部就先经过它。

Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.registry import (
    available_device_configs, read_config, load_devices,
)

print(available_device_configs())          # 看有哪些模板
cfg = read_config("remote_template.json") # 归一化成统一 dict
devices = load_devices(cfg)               # 实例化为 DeviceSet
```

8.4 DeviceSet: 一组设备的容器

`load_devices` 返回的不是裸字典，而是 `DeviceSet`——一个既能按名字访问、又对三类核心设备做了类型化、契约校验的容器。

8.4.1 三个类型化属性

.camera 该组里那个相机设备（必须是 `CameraDevice` 的实例）。

.sequencer 时序器设备 (`SequencerDevice`)。

.trap_array 阱阵列设备 (`TrapArrayDevice`)。

这三个属性在访问时做契约检查：如果配置里某个被归为相机的设备并不满足 `CameraDevice` 契约，就会暴露出来，而不是等到运行实验时才神秘失败。

8.4.2 字典式访问

`DeviceSet` 同时支持按名字访问，行为像字典又像命名空间：

`ds["seq"]` 用 `\_\_getitem\_\_` 按设备名取设备。

`ds.seq` 用 `\_\_getattr\_\_` 用属性语法取同一个设备（名字合法时）。

`"seq" in ds` 用 `\_\_contains\_\_` 判断某名字是否存在。

8.4.3 `.require(name, expected\_type)`

当你需要“既按名字取、又强制类型正确”时用 `require`。它取出名为 `name` 的设备，并断言它是 `expected\_type`（或其子类）；不满足就报错。这比裸 `ds[name]` 更安全，适合在实验脚本入口处做前置校验。

Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.base import SequencerDevice

seq = devices.require("seq", SequencerDevice)    # 取出并强制类型
print("seq" in devices)                          # True
print(devices["cam"] is devices.camera)          # 多半为 True
```

8.4.4 `.snapshot()`

`ds.snapshot()` 遍历组内每个设备、调用各自的 `snapshot()`，汇总成 `\{name: device.snapshot()\}` 形式的字典，并且保证是 **JSON-safe**（可以直接 `json.dumps`）。这用于记录“本次实验用的设备状态/参数”，方便存档与复现。

Python

```
import json
state = devices.snapshot()
print(json.dumps(state, indent=2))    # 可序列化的设备状态全景
```

8.5 打开与关闭的生命周期

`DeviceSet` 把“打开全部设备”和“关闭全部设备”封装成两个方法，并规定了严格的顺序与失败回滚。

8.5.1 `.open()` / `.close()` 的顺序规则

相机最后打开、最先关闭 `open()` 时相机放在**最后**打开；`close()` 时相机**最先**关闭。原因是相机通常依赖时序器/阱阵列已经就绪（例如曝光要与时序对齐），所以让它在最稳定的窗口内开启、在拆解一开始就退出。

失败回滚 如果 `open()` 在中途某个设备上失败，`DeviceSet` 会**回滚**已经打开的那些设备（把它们关掉），而不是留下一半打开、一半未开的不一致状态。

8.5.2 推荐的使用范式

把 `open()/close()` 配对使用，确保无论实验成功还是抛异常都能干净关闭：

Python

```
devices = load_devices("virtual")
devices.open()          # 按顺序打开，相机最后；失败自动回滚
try:
    seq = devices.sequencer
    seq.prepare(program) # 写边沿表 / 准备
    seq.fire()           # 触发一次
    seq.wait_done()      # 等待序列跑完
    frame = devices.camera.acquire()
finally:
    devices.close()      # 相机最先关，逆序拆解
```

常见错误

- 自己手动逐个 `open()` 设备而不走 `DeviceSet.open()`——会丢掉顺序保证和失败回滚。
- 实验抛异常后忘记 `close()`，导致相机/硬件句柄泄漏。务必用 `try/finally`。
- 在 `open()` 之前就调用 `acquire()/fire()`——设备尚未就绪。

8.6 设备契约：每类设备必须提供什么

契约由 `devices/base.py` 的基类定义。理解契约就能在不看具体实现的情况下知道“对一个设备能调什么”。

8.6.1 BaseDevice：所有设备的公共契约

open() 打开/初始化设备，进入可用状态。

close() 关闭设备，释放资源。

stop() 停止当前活动（区别于 `close`：停止动作但不一定释放句柄）。

snapshot() 返回该设备当前状态的 JSON-safe 字典，供 `DeviceSet.snapshot()` 汇总。

8.6.2 CameraDevice：相机额外契约

在 `BaseDevice` 之上增加：

exposure 曝光时间（属性/配置项）。

configure(...) 配置相机参数。

acquire() 采集一帧/一批数据。

capture(...) 触发并取像（采集的高层封装）。

bind_experiment(...) 把相机绑定到某次实验上下文，使采集与实验时序协同。

8.6.3 SequencerDevice: 时序器额外契约

channels 通道数。

clock_hz 时钟频率 (Hz)，例如 50_000_000 (50 MHz，对应 20 ns 一个 tick)。

prepare(program) 把编译好的序列/边沿表准备进设备（真实硬件上即写入寄存器/内存）。

fire() 触发一次序列执行。

wait_done() 阻塞等待序列跑完（部分实现提供）。

abort() 中止当前执行（部分实现提供）。

set_safe_state() 让输出回到安全/空闲电平（部分实现提供）。

8.6.4 TrapArrayDevice: 阱阵列额外契约

n_sites 阱点 (site) 数量。

关键设计取舍

TrapArrayDevice 故意不暴露每个阱点在相机像素上的中心坐标。原因是：像素中心属于标定 (calibration) 结果，会随光路、相机位置而变，不应硬编码在设备里。阱阵列只负责“有多少个阱点”这种内禀属性，像素映射由标定模块单独提供。这条边界划分能避免设备层和标定层耦合。

8.7 五个时序器类：选型决策表

时序器是本系统最容易混淆的部分，因为有五个实现，外形相似但用途迥异。下面逐一说明各自的**独特角色**与适用场景。

VirtualSequencer 离线 mock。prepare/fire 都是平凡 (trivial) 的空跑实现，不接触任何硬件。
何时用：写脚本、跑单测、调 GUI、CI——任何没有也不需要硬件的场合。

RuntimeSequencer 本地进程内运行一个 SequencerService，会真正编译边沿表。**何时用**：在控制电脑本地就能完成编译与（模拟/本地）执行，不经过网络的情况；也适合验证编译产物。

ManualSequencer 打印“现在手动启动 FPGA”，fire() 是占位空操作。**何时用**：首光调试 (first-light commissioning) ——硬件还没接好自动触发链路，你想人工按下 FPGA 启动、用本系统准备好一切其余流程。

RemoteSequencer 通过 RPyC 连到 FPGA 电脑上运行的 SequencerService 的客户端代理。参数有 host/port/channels/clock_hz/trigger_channels。open() 时会从远端 snapshot 同步通道数与时钟；prepare 把序列以 JSON 发过去，fire 调用远端执行。**何时用**：正式实验——控制电脑与 FPGA 电脑分离，跨网络驱动真实硬件。

VerilogSequencer 不执行，而是生成 Verilog。需要一个 fire_callback。**何时用**：你想把序列固化成 HDL、做综合/上板前的离线生成，而不是即时驱动。

8.7.1 选型速查

- 没有硬件、只想跑通流程 → VirtualSequencer (或整套 “virtual” 配置)。
- 本地编译、不过网络 → RuntimeSequencer。
- 硬件刚接好、需人工启动 → ManualSequencer。

- 正式跨机驱动 FPGA → [RemoteSequencer](#)。
- 生成 HDL 而非执行 → [VerilogSequencer](#)。

8.7.2 RemoteSequencer 的配置示例

正式实验里最常用的就是远程时序器。一份对应配置大致如下：

Python

```
config = {
    "seq": {
        "type": "RemoteSequencer",
        "params": {
            "host": "192.168.1.50",
            "port": 18861,
            "channels": 62,
            "clock_hz": 50_000_000,
            "trigger_channels": [0]
        }
    },
    "cam": {"type": "QCMOSCamera", "params": {"exposure": 0.005}},
    "trap": {"type": "VirtualTrapArray", "params": {"n_sites": 100}},
}

devices = load_devices(config)
devices.open()      # RemoteSequencer.open() 会从远端 snapshot 同步
                    ↪ channels/clock_hz
try:
    devices.sequencer.prepare(program)    # 序列以 JSON 发往 FPGA 电脑
    devices.sequencer.fire()              # 触发远端执行
    devices.sequencer.wait_done()
    img = devices.camera.acquire()
finally:
    devices.close()
```

关于 open() 同步

对 [RemoteSequencer](#) 来说，配置里写的 `channels/clock\_hz` 是期望值；`open()` 真正连上后会以远端 snapshot 为准把它们同步过来。所以如果本地配置和远端固件不一致，以打开后的实际值为准——这能防止本地误填的参数悄悄带偏后续编译。

8.8 编写并注册一个自定义设备

把前面所有概念串起来：要接入一个新设备，你需要（1）继承正确的领域基类以满足契约，（2）用 `register_device_class` 注册短名，（3）在配置里用该短名引用它。

8.8.1 步骤一：继承基类、实现契约方法

下面写一个最小的自定义相机。继承 [CameraDevice](#) 意味着你承诺实现相机契约里的方法（这里给出关键几个）：

Python

```

from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.base import CameraDevice

class MyCamera(CameraDevice):
    def __init__(self, exposure=0.01, **params):
        self._exposure = exposure
        self._open = False

    # --- BaseDevice 契约 ---
    def open(self):
        self._open = True          # 这里换成真实的硬件初始化
    def close(self):
        self._open = False
    def stop(self):
        pass
    def snapshot(self):
        # 必须是 JSON-safe: 只放基本类型
        return {"type": "MyCamera", "exposure": self._exposure,
                "open": self._open}

    # --- CameraDevice 契约 ---
    @property
    def exposure(self):
        return self._exposure
    def configure(self, **kwargs):
        self._exposure = kwargs.get("exposure", self._exposure)
    def acquire(self):
        ...                        # 返回一帧
    def capture(self, *a, **k):
        ...
    def bind_experiment(self, experiment):
        ...

```

8.8.2 步骤二：注册短名

Python

```

from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.registry import
↪ register_device_class
register_device_class("MyCamera", MyCamera)

```

8.8.3 步骤三：在配置里使用

Python

```

config = {
    "seq": {"type": "VirtualSequencer", "params": {"channels": 62}},
    "cam": {"type": "MyCamera", "params": {"exposure": 0.02}},
}
devices = load_devices(config)
devices.open()

```

```
try:
    assert devices.camera.exposure == 0.02
    print(devices.snapshot())    # 你的 snapshot() 会被汇总进去
finally:
    devices.close()
```

自定义设备的常见坑

- `snapshot()` 返回了非 JSON-safe 的对象（如 numpy 数组、自定义类实例），会让 `DeviceSet.snapshot()` 后续的 `json.dumps` 失败。只放基本类型（数、字符串、列表、字典）。
- 继承了 `CameraDevice` 却没实现某个契约方法，访问 `DeviceSet.camera` 时的契约校验会暴露问题——这是好事，按提示补齐即可。
- `open()` 里发生异常时没有让设备保持一致状态——记住 `DeviceSet.open()` 会回滚已开设备，你的 `close()` 应当能安全地关闭一个“只打开了一半”的设备。

8.9 把整章串成一条最小工作流

最后给出一段从配置到采集、不依赖任何真实硬件、可立即运行的完整示例，作为本章的收尾参照：

Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.registry import (
    load_devices, available_device_configs,
)
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.base import (
    CameraDevice, SequencerDevice, TrapArrayDevice,
)

print(available_device_configs())    # 看有哪些现成模板

devices = load_devices("virtual")    # 全虚拟：相机 + 时序器 + 阱阵列

# 类型化访问 + 契约校验
cam = devices.require("cam", CameraDevice) if "cam" in devices else
↳ devices.camera
seq = devices.sequencer
trap = devices.trap_array
print("sites:", trap.n_sites, "channels:", seq.channels, "clock:",
↳ seq.clock_hz)

devices.open()                      # 相机最后开；失败回滚
try:
    seq.prepare(None)                # 虚拟时序器：平凡 prepare
    seq.fire()                       # 平凡 fire
    # frame = cam.acquire()          # 真实/虚拟相机取像
finally:
    devices.close()                  # 相机最先关

import json
print(json.dumps(devices.snapshot(), indent=2))    # JSON-safe 状态全景
```

读到这里, 你应该能够: 写出三种形态的配置、理解 `\$device:` 依赖与循环检测、用 `load_devices` 得到 `DeviceSet`、通过类型化属性与 `require` 安全取设备、遵守 `open/close` 的顺序与回滚、读懂四类设备的契约, 并在五个时序器之间正确选型, 乃至注册并接入自己的设备。

9

相机采集原理（深入）

本章自底向上讲清楚“相机层”到底做什么、不做什么。相机层是整个读出（readout）流水线的最前端：它的唯一职责是**把光子变成原始像素**，并在需要时与时序器（sequencer）协作完成外触发曝光。所有“原子在哪里、亮度够不够、是否装载”的判断都**不属于**相机层，而属于后续的 sitemap/detect 读出阶段。理解这条边界，是正确使用本系统、避免把标定状态错误地塞进相机里的关键。

9.1 相机抽象契约：base.py 中的 CameraDevice

所有相机（真实的 qCMOS 与仿真的 VirtualCamera）都实现同一个抽象基类 `CameraDevice`。这个契约定义了上层代码可以依赖的全部行为，使得“换硬件”对读出流水线透明。

9.1.1 属性与配置

exposure (property) 当前曝光时间。注意它只是相机当前持有的一个数值；**真正的曝光真值来自时序序列**（见后文“曝光即真值”一节），相机上的这个属性应当被序列驱动，而不是反过来去驱动序列。

configure(exposure=..., **kwargs) 配置相机参数。**exposure** 是最常用的关键字参数，用来设置曝光时间；****kwargs** 允许具体实现接受额外的设备相关参数（例如读出速度、ROI 等）。该方法只改变相机内部状态，不触发任何采集。

bind_experiment(session) 把相机绑定到一个实验会话对象。绑定后相机可以访问会话里的时序（`exp.timing`）等资源，这是相机参与“成像序列”协作的前提。

9.1.2 采集：acquire 与 capture 的区别

系统刻意提供了两层采集入口，职责不同，初学者必须分清。

acquire(frames, sequence, sequencer) → list[np.ndarray] 底层采集。它返回一个**原始帧列表**，每个元素是一帧 `uint16` 的 NumPy 数组（原始像素，未做任何处理）。这是与硬件/触发最贴近的接口，读出流水线内部依赖它。

capture(frames=1, exposure=None, sequence=None, display=True) → CaptureResult 面向交互/调试的高层包装。它在内部调用采集，并把结果打包成一个 `CaptureResult`。

`CaptureResult` 上有几个常用字段：

.images 本次采集得到的所有帧（原始图像列表）。

.image 最后一帧（`.images` 的最后一个元素），方便“只看一张”的场景。

.plot 把原始图像画出来的便捷方法。它只画原始像素，绝不叠加任何标注——没有站点圆圈、没有阈值、没有检测结果。

9.1.3 核心不变量：capture 只显示原始图像

最重要的一条边界

`capture()`（以及 `CaptureResult.plot`）只显示原始图像。站点圆圈（site circles）、阈值（thresholds）这些都属于读出层（sitemap / detect），永远不属于相机。

如果你发现一次 `capture()` 居然画出了圆圈或阈值，这不是一个显示选项问题，而是一个架构 bug 的征兆：说明标定状态（calibration state）被错误地放进了相机层。正确的做法是把这些标定/检测逻辑移回 readout 层。

为什么如此强调这条不变量？因为相机层一旦“知道”站点在哪里、阈值是多少，它就和某次特定标定耦合了，换一组 trap、换一次对焦都会让相机层失真，且会让“原始数据”不再纯净——你无法再相信 `capture()` 给你的是探测器真实读到的东西。把相机层保持为“只产出原始像素”，才能让下游的 sitemap/detect 自由演化、可重复标定。

9.2 相机与时序器的协作（唯一协作点）

相机自己不会凭空拍照；在真实实验里，曝光由时序硬件用外触发（external trigger）精确控制。`acquire` 在被传入一个 `sequencer` 时，会执行一段固定的协作流程。这是整个系统里相机与时序器唯一一处合作的地方，其余任何地方都不应让相机去碰时序器。

当 `acquire(frames, sequence, sequencer)` 拿到 `sequencer` 时，流程如下：

1. **扩展成像序列**：把成像序列扩展到恰好等于请求的触发次数（即 `frames` 个触发）。换句话说，要拍几帧，就生成几个触发脉冲，一一对应。
2. `sequencer.prepare(seq)`：把这段序列下发、准备好（写入边沿表、保持复位等，见时序器文档）。
3. `sequencer.fire(seq)`：启动序列，开始发脉冲。
4. **相机经外触发采集**：相机此时处于外触发等待状态，每来一个触发脉冲就曝光读出一帧。
5. `sequencer.wait_done()`：阻塞等待序列跑完，确保所有触发都已发出、所有帧都已采到。

理解这个顺序很重要：**是序列在驱动相机**，不是相机在轮询时间。相机被动地等触发，触发的数量与时机由序列决定。这保证了曝光窗口与实验中的探测脉冲（probe pulse）在时间上严格对齐。

常见错误

不要试图在 readout 流水线之外手动调 `sequencer.prepare/fire/wait_done` 来“帮相机拍照”。这条协作流程已经封装在 `acquire` 里；绕过它要么导致触发数与帧数不匹配，要么导致相机和序列竞态。需要带时序的采集，就把 `sequencer` 传给 `acquire`（或更高层的 `capture` 路径），让它替你完成这五步。

9.3 曝光即真值 (exposure-as-truth)

这是一个容易搞反的设计原则：**曝光时间的真值来自序列，而不是相机。**

具体地说，成像曝光由**探测脉冲的宽度** (probe pulse width) 决定——原子在多长的探测光脉冲里发荧光，相机就应该在多长时间里收集这些光子。因此正确的做法是：

真值在序列 曝光等于序列里探测脉冲的宽度。相机的 `exposure` 应当**从序列取值**，而不是你在相机上设一个数、反过来去影响序列。

修改曝光的正确入口 要改曝光,改序列:调用 `exp.timing.configure_imaging(exposure=...)`。这会更新成像序列里探测脉冲的宽度，相机随之得到正确的曝光窗口。

为什么不直接 `camera.configure(exposure=...)`?

你当然可以用 `configure(exposure=...)` 设相机自身的曝光数值（例如纯软件触发、无序列的快速调试）。但在真实外触发实验里，曝光窗口由触发脉冲宽度决定。如果你只改相机数字、不改序列，二者就会不一致：相机以为曝光是 A，硬件实际给的探测脉冲是 B，得到的荧光量与你的预期对不上。把序列当作单一真值源 (single source of truth)，用 `exp.timing.configure_imaging(exposure=...)` 统一修改，就不会出现这种漂移。

9.4 两种实现：qCMOS 真机 vs Virtual 仿真

同一个 `CameraDevice` 契约有两个实现。它们对上层完全可替换，但内部机制和适用场景不同。

9.4.1 QCMOSCamera (qcmos.py): 真实硬件

`QCMOSCamera` 封装了 Hamamatsu qCMOS 相机，走 DCAM SDK，使用**外触发**采集。它的配置由 `QCMOSConfig` 描述：

exposure 曝光时间，默认约 20 ms。

readout_speed 读出速度 (DCAM 的读出模式)。

roi 感兴趣区域 (Region Of Interest)，只读出传感器的一块子区域以提速/省数据。

device_index 设备索引，用于在多台相机时选定哪一台。

timeout_ms 等待触发/读出的超时 (毫秒)。外触发场景下，如果序列没发触发或发晚了，相机会在这个时间后超时报错，而不是无限等待。

它的生命周期是一个明确的状态机：

Python

```
open()      # 打开 DCAM 设备，_dcam 变为有效句柄
configure() # 下发 exposure / readout_speed / roi 等
acquire()   # 进入外触发等待并采集
close()     # 关闭设备，释放句柄
```

_dcam 的语义 当相机处于关闭状态时，`_dcam is None`。这是判断“相机是否已打开”的内部标志：在 `open()` 之后它是一个有效的 DCAM 句柄，在 `close()` 之后又回到 `None`。如果你在 `_dcam is None` 的状态下尝试采集，会失败——必须先 `open()`。

控制流顺序不可乱

真机的标准顺序是 `open()` → `configure()` → `acquire()` → `close()`。在没 `open()` 之前 `configure/acquire` 没有有效句柄可用；忘了 `close()` 会占住设备让下次 `open()` 失败。把 `acquire` 放在 `open` 与 `close` 之间，是使用真机的硬性要求。

9.4.2 VirtualCamera (virtual.py): 仿真相机

`VirtualCamera` 让整条读出流水线在完全没有硬件的情况下也能跑，对开发、测试、CI 极其有用。它不接触任何真实设备，而是合成图像：

- 通过 `trap_array.render_image()` 渲染合成图。
- 每一个被占据 (occupied) 的站点画成一个高斯点扩散函数 (Gaussian PSF) —— 模拟一个原子的荧光像。
- 叠加泊松散粒噪声 (Poisson shot noise)，逐原子、逐帧采样，使每帧都有真实相机那样的统计涨落。

这样产出的图像虽是合成的，但格式与真机一致 (原始像素)，所以 `sitemap/detect` 等下游照常工作，你可以在没有原子、没有相机的桌面上完整验证读出逻辑。

9.4.3 force_all_sites 参数与 “sitemap” 遗留行为

`VirtualCamera.acquire` 有一个显式的 `force_all_sites` 参数。它的来历值得说清楚，因为这是一个仿真专属的细节：

新接口 `force_all_sites` 显式控制 “是否强制所有站点都视为已装载 (loaded)”。需要渲染 “满阵列” 图像 (例如生成 `sitemap` 标定图) 时把它打开即可。

遗留回退 (legacy fallback) 历史上，这个行为是隐式地靠序列名判断的：当 `sequence` 的名字等于 “sitemap” 时，就当作 “所有站点都装载”。这是一个仅限仿真的便利约定。

与真机的本质区别 真实硬件没有这种捷径：要得到 “所有站点都亮” 的图像，必须真的把原子装载到每个站点上。仿真可以 “假装” 全装载，真机不行。把这一点记牢，能避免你在真机上误以为传个名字叫 “sitemap” 的序列就能得到满阵列。

迁移提示

新代码应当用显式的 `force_all_sites=True` 来表达 “渲染满阵列”，而不是依赖 `sequence.name == "sitemap"` 这个隐式约定。显式参数让意图清晰，也避免把仿真专属行为误带进期望在真机上同样生效的代码路径。

9.5 一个可运行的采集示例

下面给出一个从绑定实验到拿到原始帧的最小例子，串起本章所有概念。注意：先用序列设定曝光真值，再采集；带时序器时由 `acquire` 完成 `prepare/fire/wait_done` 协作；最后用 `capture` 的 `.plot` 只看原始图。

Python

```
# 1) 绑定实验会话：让相机能访问 exp.timing 等资源
camera.bind_experiment(session)
```



```

# 2) 曝光即真值: 改曝光要改序列, 而不是只改相机
# 这会更新成像序列里探测脉冲的宽度 (= 曝光窗口)
exp.timing.configure_imaging(exposure=20e-3) # 20 ms

# 3) 高层采集: capture 内部完成采集并打包成 CaptureResult
# sequence= 成像序列; display=True 会画出原始图
result = camera.capture(frames=3, sequence=imaging_seq, display=True)

# CaptureResult 的常用字段:
all_frames = result.images # list[np.ndarray], 全部原始帧 (uint16)
last_frame = result.image  # 最后一帧 = images[-1]
result.plot()               # 只画原始像素, 绝不叠加圆圈/阈值

# 4) 若需要底层、带时序器的采集 (readout 流水线内部用法):
# acquire 会把序列扩展到正好 3 个触发, 然后
# sequencer.prepare(seq) -> fire(seq) -> 相机外触发采 3 帧 -> wait_done()
raw = camera.acquire(frames=3, sequence=imaging_seq, sequencer=sequencer)
# raw 是 list[np.ndarray], 每个元素是一帧 uint16 原始像素

```

自检清单

- `capture()` 画出来有圆圈或阈值? —— 架构 bug, 标定状态被放进了相机层, 应移回 readout (sitemap/detect)。
- 想改曝光却去调 `camera.configure(exposure=...)`? —— 在外触发实验里请改序列: `exp.timing.configure_imaging(exposure=...)`。
- 真机采集报句柄无效? —— 检查是否漏了 `open()` (此时 `_dcam is None`), 顺序应为 `open`→`configure`→`acquire`→`close`。
- 仿真想要满阵列图? —— 用显式 `force_all_sites=True`, 别再依赖序列名 "sitemap" 的遗留回退; 真机则必须真正装载原子。
- 帧数与触发数对不上? —— 别在 `acquire` 之外手动驱动时序器, 让 `acquire(...)` 把序列扩展到恰好 `frames` 个触发。

The code confirms and enriches the FACTS. I have enough grounding to write the chapter. Here is the LaTeX texbody fragment.

10

相机读出教程与原理（深入）

本章从零讲解中性原子实验里的**相机读出** (camera readout)：如何把相机拍到的一帧二维荧光图像，转换成“哪几个光阱里有原子”这一组布尔判定。整条链路都挂在会话对象 `exp.readout` 上，它是一个 `ReadoutSubsystem` 实例(定义在 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/subsystems/readout.py`)。底层的纯数学函数集中在 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/core/analysis.py`，标定结果的容器是 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/core/calibration.py` 里的 `TrapCalibration`。

读懂本章后，你应当能独立完成一次完整读出：先做三步**标定** (site-map → thresholds → 可选的 `detection_time`)，再做**逐帧探测** (detect)，并能解释每一步背后的物理与统计原理、每个参数的含义、返回值的结构，以及最常见的几类失败如何排查。

10.1 总体框架：标定一次，探测无数次

读出的核心思想是把“昂贵、需要假设”的工作和“廉价、每发都做”的工作分开：

标定 (calibration) 偶尔做一次，回答两个问题：每个光阱在相机像素坐标里的中心在哪里 (site-map)；以及每个光阱“暗”和“亮”之间的计数分界线在哪里 (thresholds)。标定通常需要一个**特殊的假设** (比如“所有光阱都装满原子”)，所以它**不是测量，而是定标**。

探测 (detection) 每一发 (shot) 都做：拿到一帧图像，在每个已知中心周围数光子计数，把计数和阈值逐位比较，得到一个布尔占据向量。它是一个**纯阈值二分类**，每一发完全独立，不依赖前后历史。

三步标定，每一步都产生一个 `TrapCalibration` 并**原地存回会话** (store on the session)。后续的 `exp.readout.current` 永远指向“当前生效”的那份标定。三步是层层递进的：

1. `sitemap(...)` 找出 N 个中心坐标 `centers` (形状 $(N, 2)$ ，像素坐标)。
2. `thresholds(...)` 在已知中心的基础上，给每个位点定一条计数阈值 `thresholds` (形状 $(N,)$)。
3. `detection_time(...)` (可选) 扫描成像曝光时间，找到一个保真度 (fidelity) 饱和的好成像时间。

只有 site-map 之后才能做 `thresholds` (thresholds 需要中心坐标才能数 ROI)；只有 thresholds 之后

才能做 detect(detect 需要阈值才能分类)。这条依赖链在代码里由 `require(thresholds=True/False)` 守护。

一句话记住流程

`sitemap` 回答“原子可能在哪”，`thresholds` 回答“多亮才算有原子”，`detect` 回答“这一发到底哪几个有原子”。

10.2 第一步: site-map 标定 (找中心)

10.2.1 调用与返回

Python

```
res = exp.readout.sitemap(
    frames=20,          # 平均多少帧来压噪声
    grid_shape=(5, 7),  # 光阱排成 5 行 7 列, 共 35 个位点
    ordering="row-major", # 位点编号顺序
    roi_radius=1,        # 每个中心周围 (2*1+1)=3x3 的方框
    reducer="mean",      # 把方框里的像素压成一个标量的方式
    display=True,        # 画出带圆环的标注图
)
```

返回一个 `SitemapResult`, 关键字段:

res.calibration 一个 `TrapCalibration`, 其中 `res.calibration.centers` 是形状 $(N, 2)$ 的像素坐标数组, 每行是一个 (x, y) 。这份标定已经被原地存回会话, 等价于 `exp.readout.current`。

res.average_image 把 `frames` 帧逐像素平均后的二维图 (信噪比比单帧高)。

res.images 用于平均的原始帧堆栈, 方便事后复查。

res.plot 当 `display=True` 时给出的标注图: 在平均图上, 每个找到的中心套一个圆环。这是你**第一眼必须看的东西**——肉眼确认圆环都落在真实亮斑上、数目正确、顺序合理。

10.2.2 参数逐个解释

frames 平均的帧数。平均是为了压低读出噪声与散粒噪声: N 帧平均后噪声标准差约降到 $1/\sqrt{N}$ 。20 帧是一个稳妥起点; 亮斑很弱时可以加大。

grid_shape (ny, nx) , 即行数乘列数。它决定要找的位点总数 $N = ny \times nx$, 也决定排序逻辑怎么把散乱的点切成网格。**这个数必须和真实光阱排布一致**, 否则要么找不够、要么排错。

ordering 位点的全局编号顺序, 见下面“位点排序”小节。它决定 `centers` 里第 0、1、2... 行对应物理上哪个阱, 进而决定后续所有 `counts`、`occupied` 向量的下标含义。

roi_radius 即底层 `roi_counts` 的 `radius`。中心 (cx, cy) 周围取一个 $(2 \times radius + 1) \times (2 \times radius + 1)$ 的正方形方框 (`radius=1` 即 3×3)。半径太小会漏掉原子荧光的尾巴, 太大会把邻阱的光也数进来。

reducer 把 ROI 方框里那一小块像素压成一个标量的方式, 支持 `"mean"`、`"sum"`、`"median"`、`"max"`。
`mean` 最常用、抗噪; `sum` 与曝光线性成比例; `median` 抗坏点; `max` 对热点敏感。**这个选择必须在 `thresholds` 和 `detect` 之间保持一致** (见后文一致性约束)。

`display` 是否生成 `res.plot` 标注图。批量脚本里可设 `False` 省时。

10.2.3 原理: `find_site_centers` 怎么找中心

底层是 `core/analysis.py` 里的 `find_site_centers`。直觉上它在做“在一张全亮的图里挑出 N 个最显眼的山峰, 再把山峰排进网格”。具体步骤:

1. **平均**: 把 `frames` 帧平均成一张干净图 (信噪比更高)。
2. **高斯平滑**: 用 `gaussian_filter(sigma=1.0)` 轻度模糊。把单像素噪声尖峰抹平, 让每个原子荧光斑变成一个圆润的单峰, 避免一个阱被误判成好几个峰。
3. **找局部极大**: 用 `maximum_filter` 找局部极大值点 (一个像素等于它邻域里的最大值, 就是候选峰)。`min_distance` 控制邻域大小, 默认按图像尺寸和网格密度自动估算 (约为相邻阱间距的一半), 确保不会把同一个斑找成两个。
4. **相对阈值过滤**: 计算 `cutoff = min + threshold_rel*(max - min)`, 默认 `threshold_rel=0.35`, 即只保留亮度高于“动态范围 35%”的候选峰。这把背景里的伪峰滤掉。
5. **兜底**: 如果通过阈值的候选少于 N , 就退化为“直接取整张平滑图里最亮的 N 个像素”, 保证总能凑够 N 个点 (但这通常意味着信噪比不够好, 应当警觉)。
6. **按亮度取前 N** : 候选按峰值亮度排序, 取最亮的 N 个。
7. **排序进网格**: 交给 `sort_centers_grid` 按 `ordering` 排成稳定的位点顺序。

最关键的假设

site-map 假设所有光阱都被占据。它本质是在一张“满阵列”图上定位, 所以它是**定标而非测量**——你不能用 site-map 的结果去回答“现在有几个原子”, 那是 detect 的工作。做 site-map 时务必让阵列尽量全满、亮度均匀。

10.2.4 位点排序: `row-major` / `serpentine` / `column-major`

`ordering` 决定 `centers` 的行顺序, 也就决定了你后面看到的“第 0 号阱、第 1 号阱...”在物理上是谁。在 `analysis.py` 中支持的取值 (含别名):

“row-major” 先按 y 切成 n_y 行, 每行内部按 x 从左到右。编号像读书: 左上 $\rightarrow$ 右, 再下一行左 $\rightarrow$ 右。最常用、最好理解。

“serpentine” 蛇形 (snake): 奇数行反向。即第一行左 $\rightarrow$ 右, 第二行右 $\rightarrow$ 左, 第三行左 $\rightarrow$ 右.....适合物理上按蛇形寻址的系统。

“column-major” 先按 x 切成 n_x 列, 每列内部按 y 。编号按列走。

排序的实现思路: 先按一个轴排序再 `array_split` 切成等份 (行或列), 份内再按另一个轴排序, 蛇形时把奇数份反转。**选定一种 `ordering` 后就别再改**, 否则同一个 `exp` 上前后做的标定下标含义会错位。

10.3 第二步: thresholds 标定 (定亮暗分界)

10.3.1 调用与返回

Python

```
res = exp.readout.thresholds(
    frames=100,      # 采多少帧来建直方图 (越多分界越稳)
    site=0,          # display 时重点画哪个位点的直方图
    exposure=None,   # 成像曝光时间; None 用会话默认
    display=True,
)
print(res.thresholds)      # 形状 (N,), 每个位点一条阈值
print(res.selected_site)   # = site, 被重点展示的位点
print(res.fidelity)        # 该位点暗/亮分布的保真度估计
```

返回 `ThresholdResult`, 关键字段:

res.calibration 更新后的 `TrapCalibration`, 现在它**同时有** `centers` 和 `thresholds`。这份已存回会话, `exp.readout.current` 指向它。

res.thresholds 形状 `(N,)`, 每个位点一条标量阈值。与 `res.calibration.thresholds` 同值。

res.counts 形状 `(shots, sites)`, 即 `frames` 帧 $\times$ `N` 位点的逐帧逐位计数原始数据, 可用来自己重画直方图。

res.selected_site 等于入参 `site`, 仅用于 `display` 聚焦展示某个位点。

res.fidelity 选中位点的读出保真度估计 (见原理小节)。

10.3.2 原理: 从直方图到 Otsu 阈值

对每一帧、每一个位点, 先用 `roi_counts` 在该中心周围取 `(2*radius+1)` 见方的方框, 按 `reducer` 压成一个**标量计数**。把 `frames` 帧累起来, 每个位点就有一串计数样本。这串样本天然**是双峰**的:

暗峰 (dark) 阱里**没有**原子时, 方框里只有背景光读出噪声, 典型计数约 `0-5`。

亮峰 (bright) 阱里**有**原子时, 原子荧光叠在背景上, 典型计数约 `50-200`。

把每个位点的计数装进 `96` 个直方图 bin, 再用 `otsu_threshold` 求分界。Otsu 法的数学直觉: 在所有可能的分界线里, 挑那条让**类间方差最大** (等价于类内方差最小) 的。设分界把样本分成“暗类”和“亮类”, 权重各为 ω_0, ω_1 ($\omega_0 + \omega_1 = 1$), 均值各为 μ_0, μ_1 , 类间方差正比于 $\omega_0 \omega_1 (\mu_1 - \mu_0)^2$ 。Otsu 扫遍所有 bin 边界, 取让这个量最大的那条。直觉上它会落在双峰之间最深的“山谷”里。典型阈值约 `20-50`, 正好卡在暗峰和亮峰中间。

代码里 `otsu_threshold` 还做了健壮性处理: 先滤掉非有限值; 若所有值都相同则直接返回该值; 用累积概率 ω 与累积均值 μ 向量化计算每个候选分界的类间方差分数, 取 `argmax` 对应的 bin 中心。

为什么是 96 个 bin

bin 太少会让阈值“量化”得太粗 (分辨不出谷底); bin 太多则每个 bin 样本太少、直方图噪声大、谷底飘。96 是在“分辨率”和“统计平滑”之间的折中。`frames=100` 提供大约 $100 \times N$ 个样本来填这些 bin。

10.3.3 保真度：estimate_threshold_fidelity

`res.fidelity` 来自 `estimate_threshold_fidelity(values, threshold)`。原理是把一条计数分布按给定阈值劈成左（暗）右（亮）两半，对每半各拟合一个高斯（取均值 μ 与样本标准差 σ ），然后算两个错判概率：

- 暗被误判成亮的概率 = 暗高斯落在阈值右边的尾巴；
- 亮被误判成暗的概率 = 亮高斯落在阈值左边的尾巴。

两个高斯尾巴的重叠越小，保真度越高。代码用正态分布 CDF (`_normal_cdf`，基于误差函数 `erf`) 算这两个正确判定概率，按两类样本数加权得到原始保真度 `raw_fidelity`。此外还乘了一个置信度修正：用分离度 `separation = |mu1-mu0| / sqrt(s0^2+s1^2)` 和左右两类的平衡度，把“样本太偏、两峰太近”时虚高的保真度往 0.5 拉回，避免给出过于乐观的数字。返回的 `FidelityEstimate` 里还带 `dark_mean/bright_mean/dark_sigma/bright_sigma/separation` 等诊断量，便于你判断“是真分得开，还是只是样本太少凑出来的”。

一个好的读出，单位点保真度通常应在 0.99 以上；如果 `res.fidelity` 偏低，往往是成像时间不够（亮峰不够亮）或背景太高（暗峰漂移）。

10.4 进阶读出：PSF 加权提取 + 双高斯阈值 (Rb87)

方框计数 + Otsu 是默认方法，简单稳健。但在低光子数（成像时间短）或位点密集、点扩散函数（PSF）有重叠时，方框把信号像素和背景像素等权相加，信噪比会被边缘背景拖低。Rb87 qCMOS 读出用两点改进，二者都接在同一套 `TrapCalibration.signals/detect` 契约后面，方框法仍是默认，可逐项开启。

10.4.1 PSF 加权提取：method="psf"

Python

```
sm = exp.readout.sitemap(method="psf", psf_half_width=3, frames=20)
```

`sitemap(method="psf")` 在找出中心之后，额外从全亮模板（所有位点都有原子时的多帧平均）里给每个位点拟合一张归一化的 PSF 权重图（ $(2 \times \text{psf_half_width} + 1)$ 见方，默认 7×7 ）。逐发提取时，信号 = 该位点 box 内背景扣除后的像素与这张权重图的点积（匹配滤波）。匹配滤波是“已知形状、加性噪声”下信噪比最优的线性提取：靠近原子的像素权重高，远离的接近 0，背景被自然压制。标定对象因此多带 `psf_weights` (N, h, w) 与 `psf_boxes` ($N, 4$) 两个字段，`save/load` (JSON 与 npz) 都会原样往返。

10.4.2 双高斯阈值：method="bimodal"

Python

```
th = exp.readout.thresholds(method="bimodal", frames=120)
```

`thresholds(method="bimodal")` 不再只取一条 Otsu 谷底，而是：先用精确 1D Otsu 在排序样本上做一次经验劈分，再对暗、亮两侧各自估计单侧峰核的均值与宽度（只用远离峰间桥的那一侧分位数，避免部分丢失/弱发的“桥”样本把亮峰宽度撑大），最后把阈值放在两个高斯总错判率最小的点上，并按模型给出 $0.5 \times (F_{\text{dark}} + F_{\text{bright}})$ 的保真度。阈值仍是逐位点的 ($N,$) 数组；提取用的是该标定自己的方法 (`calibration.signals`)，所以 PSF 标定下阈值天然定在 PSF 信号上，和 `detect` 完全一致。某位点样本退化拟合不出时，会自动回退到该位点的 Otsu 阈值，保证标定全有限。

取原则, 不照搬

这套实现移植自 `references/.../rb87\_readout\_v16` 的算法 (PSF 拟合、双高斯定阈、匹配滤波提取), 但参考归档里那套面向离线批处理的文件 IO / 流式缓存 / 输出目录命名 / 重复别名没有带进来——在线控制库只要算法, 按本仓库的分层 (原语在 `core/`, 标定在 `operations/`, 编排在 `ReadoutSubsystem`) 重写。

10.5 第三步: detect 探测 (逐发判定)

10.5.1 调用与返回

Python

```
res = exp.readout.detect(
    exposure=None,          # 成像曝光; None 用会话默认
    display=True,           # 在图上把“占据”的阱套亮环
    what="occupancy",       # 探测语义: 占据/不占据
)
print(res.detection.counts)          # (N,) 本发每位点计数
print(res.detection.occupied)        # (N,) bool 占据向量
print(res.detection.occupied_indices) # 占据位点的下标列表
```

返回 `DetectionResult`:

res.image 这一发拍到的原始二维图像。

res.detection 一个 `AtomDetection`, 含 `counts` (每位点计数)、`occupied` (形状 `(N,)` 的布尔向量)、`occupied_indices` (占据下标列表)、`thresholds` (这次用的阈值)。

res.calibration 本次探测用到的 `TrapCalibration` (提供 `centers` / `thresholds` / `reducer` / `radius`)。

res.plot 当 `display=True` 时, 在图上给占据的阱套亮环——一眼看出这一发装了几个、装在哪。

10.5.2 原理: detect_atoms 是纯阈值二分类

底层是 `detect_atoms(image, centers, thresholds, radius, reducer)`:

1. 用 `roi_counts` 在每个中心算出 `counts` (形状 `(N,)`), 用法和标定时完全一样。
2. 把 `thresholds` 广播成长度 `N` (标量阈值会被扩成每位点同值)。
3. 逐位比较 `occupied = counts > thresholds`——**严格大于**才算占据。
4. `occupied_indices = flatnonzero(occupied)`, 即占据位点的下标。

这是一个**逐元素的阈值二分类**, 没有任何跨位点或跨发的耦合, **每一发独立**。它的判定质量完全由两件事决定: 中心准不准 (site-map)、阈值对不对 (`thresholds`)。探测本身没有可调旋钮去“补救”标定的错误——这也是为什么前两步要做好。

10.5.3 一致性约束: reducer 与 radius 必须匹配

`reducer` 和 `radius` 在**训练阈值**和**探测时必须一致**。道理很直接: 阈值是在某种 `reducer` / `radius` 下的计数尺度上定出来的。如果训练时用 `mean`、`3×3`, 探测时却用 `sum`、`5×5`, 计数的绝对尺度完全不同, 那条阈值就毫无意义, 判定会系统性出错。

代码用一个干净的设计杜绝了这种错配: `reducer` 和 `radius` 被存进 `TrapCalibration` (`calibration.reducer` 等)。当你通过 `TrapCalibration.detect` 路径探测时, 它自动复用标定里存的 `reducer/radius`, 所以“训练-探测不一致”这条路在 `TrapCalibration.detect` 上根本走不到。你只需在最初做 `site-map / thresholds` 时想清楚 `reducer` 和 `radius`, 之后探测会自动沿用。

10.6 第四步 (可选): detection_time 扫描成像时间

10.6.1 调用与返回

Python

```
res = exp.readout.detection_time(
    times=[5e-6, 2e-5, 1e-4], # 要扫的成像曝光时间 (秒)
    shots=60,                  # 每个时间点采多少发来估保真度
    reference_shots=30,         # 建参考阈值用多少发
    live=True,                  # 边扫边出结果
    display=True,
)
print(res.times)              # 实际扫过的时间数组
print(res.fidelities)         # 对应每个时间的保真度
res.stop()                    # 提前停止 live 扫描
```

返回 `DetectionTimeScanResult`: `res.times` 与 `res.fidelities` 一一对应; `res.stop()` 用于中途停止 live 采集。

10.6.2 原理: 用保真度曲线挑成像时间

成像时间越长, 原子荧光积累越多、亮峰越亮、暗亮越分得开、保真度越高; 但太长会带来散射加热、原子丢失、占空比下降。所以要找一个**保真度开始饱和 (plateau)** 的最短时间——再长也换不来明显收益。

扫描做法:

1. 先在一个**长曝光**下采参考帧 (启发式取 $3 * \max(\text{times})$, 确保参考足够亮、分得很开), 由参考帧建一条**参考阈值**。
2. 对 `times` 里的每个时间, 采 `shots` 发, 用 `otsu_threshold` 在这个时间下重新定阈值, 再用 `estimate_threshold_fidelity` 估这个时间的保真度。
3. 把 `(time, fidelity)` 连成曲线。

读图方法: 在 `fidelities` 对 `times` 的曲线上, 找保真度**爬到平台**的那个拐点时间, 取拐点附近 (略偏右一点, 留余量) 作为正式成像时间。比这更长只是浪费占空比、徒增加热。

10.7 保存、加载、清除与当前标定

`exp.readout.save(path)` 把当前 `TrapCalibration` (`centers + thresholds + reducer + radius` 等) 落盘, 返回写入路径。每次实验开机标定一次后存盘, 第二天可直接加载, 省去重标。

`exp.readout.load(path)` 从盘上读回一份标定并设为当前。返回该 `TrapCalibration`。

`exp.readout.clear()` 清空当前标定 (把会话上的标定置空)。之后必须重新 `site-map / thresholds` 才能 detect。

exp.readout.current 只读属性，返回当前生效的 `TrapCalibration`，没有则为 `None`。脚本里探测前可用它确认“标定确实有位且带阈值”。

加载后仍要 sanity-check

加载的标定是按**当时**的相机视场和阵列位置定的。如果光路漂了、相机动了、阱阵列重排了，旧 centers 会偏。加载后建议先 `detect(display=True)` 看一眼亮环是否还套在真实亮斑上，再投入正式采集。

10.8 一次完整的端到端示例

Python

```
# 0) 假设 exp 是已建好的会话，相机、光阱已就绪、阵列尽量装满

# 1) site-map: 在满阵列上找 5x7 个中心
sm = exp.readout.sitemap(frames=20, grid_shape=(5, 7),
                        ordering="row-major", roi_radius=1,
                        reducer="mean", display=True)
print(" 找到中心数: ", len(sm.calibration.centers)) # 期望 35

# 2) thresholds: 建暗/亮直方图并定阈值
th = exp.readout.thresholds(frames=100, site=0, display=True)
print("0 号位点保真度: ", th.fidelity)
print(" 阈值范围: ", th.thresholds.min(), "~", th.thresholds.max())

# 3) (可选) 扫成像时间，挑保真度饱和点
dt = exp.readout.detection_time(times=[5e-6, 2e-5, 1e-4],
                                shots=60, reference_shots=30,
                                live=True, display=True)
for t, f in zip(dt.times, dt.fidelities):
    print(f"t={t:g}s -> fidelity={f:.4f}")

# 4) 存盘，方便下次直接 load
exp.readout.save("calib_today.json")

# 5) 逐发探测（这一步可以在采集循环里反复调用）
det = exp.readout.detect(display=True, what="occupancy")
print(" 占据下标: ", det.detection.occupied_indices)
print(" 占据数: ", int(det.detection.occupied.sum()))
```

10.9 常见失败与排查

site-map 找的中心数不对 / 圆环没套在亮斑上 多半是 `grid_shape` 写错（行列反了或总数不符）、阵列没装满（违反“全占据”假设）、或亮度太弱触发了“取最亮 N 像素”兜底分支。对策：核对 `grid_shape=(ny, nx)` 与真实排布一致；确保标定时阵列尽量全满、均匀；加大 `frames` 提信噪比；看 `res.plot` 用肉眼复核。

两个相邻阱被找成一个 / 一个阱被找成两个 阱间距和 `min_distance`、平滑 `sigma` 不匹配。间距很密时局部极大邻域可能把两个阱并成一个峰；噪声大时一个斑可能裂成两峰。对策：保证标定图够干净（多平均），必要时检查 `grid_shape` 是否与实际密度相符。

thresholds 的直方图不是双峰 / 阈值落在奇怪的地方 暗亮分不开。常见原因：成像时间太短（亮峰不够

亮、和暗峰糊在一起)、背景过高(暗峰右移)、或某些阱在标定期间根本没原子。对策:先用 `detection_time` 找到保真度饱和的成像时间再定阈值;检查 `res.counts` 直方图确认是否真双峰;压低杂散光。

保真度偏低(明显小于 0.99) 暗亮高斯重叠大。看 `FidelityEstimate` 里的 `separation`: 偏小说明两峰太近,需要更长成像时间或更低背景。也注意 `left_fraction/right_fraction` 是否严重失衡(某一类样本太少),这会触发置信度修正把保真度往 0.5 拉,提示“数据本身不足以下结论”。

detect 结果系统性偏多/偏少占据 几乎一定是**阈值整体偏了**或**reducer/radius 不一致**。本系统通过把 reducer/radius 存进 `TrapCalibration` 并在 `TrapCalibration.detect` 里自动复用,杜绝了不一致这条路;若你自己直接调底层 `detect_atoms`,务必手动传与训练时相同的 `radius/reducer`。阈值偏了则回到 `thresholds` 重标(成像条件变了就必须重标)。

detect 报“center 越界”或“ROI 无有限像素” `roi_counts` 会校验中心在图像范围内、ROI 里有有限像素。报错通常意味着加载的旧标定与当前相机视场不匹配(视场/裁剪变了),或图像里有 NaN/Inf。对策:确认相机 ROI/分辨率与标定时一致;必要时 `clear()` 后重新 site-map。

加载旧标定后判定全错 光路或相机漂移导致 centers 偏离真实亮斑。对策:加载后先 `detect(display=True)` 目视确认,发现偏了就重做 site-map(漂移大时阈值也要重标)。

换了 ordering 导致下标对不上 同一会话里前后用了不同 `ordering`, `occupied` 向量的下标含义就变了。对策:在一套实验里**固定一种 ordering**,并在分析脚本里用同一约定解读位点编号。

排查总原则

读出链是“site-map → thresholds → detect”的单向依赖。判定出问题时, **从上游往下游查**: 先用 `res.plot` 确认中心对不对,再看 `res.counts` 直方图确认阈值合不合理,最后才怀疑 detect 本身——而 detect 是纯阈值比较,几乎从不“自己出错”,错都在它上游的标定里。

11

标定结果对象与完整实验流程（深入）

本章面向第一次接触本系统的读者，目标是把“如何把一张相机原始图像变成『每个阱位有没有原子』的判定”以及“如何把这套判定嵌进一次完整的实验采集循环”讲透。我们会先把核心数据对象 `TrapCalibration` 逐字段拆开，再讲结果对象（result objects）及其关键不变量——**覆盖层永不改写原始图像数组**，然后给出可直接运行的整套 notebook 采集流程、扫描配合读出的循环，最后是一整节排错清单。

阅读本章前，你只需要知道：相机会拍一张二维图像；图像上有一组规则排布的光阱（trap），每个阱位中心对应图像里的一个小区域（ROI）；我们要在每个 ROI 里统计亮度，再用阈值判断该阱位是否被原子占据。`TrapCalibration` 就是承载“中心坐标 + 阈值 + ROI 几何 + 统计方式”这一整套标定信息的对象。

11.1 TrapCalibration 深入：每个字段的含义

`TrapCalibration` 定义在 `core/calibration.py`。它是一个纯数据 + 行为的标定对象：既保存做点位探测（detection）所需的全部参数，又自带把图像变成判定结果的方法。把它理解成“一份可序列化、可复现的探测配方”。

11.1.1 字段清单

centers 形状为 `(N, 2)` 的数组，表示 `N` 个阱位中心在图像中的像素坐标。这是标定的核心：每个中心配合 `roi_radius` 框出一个用于统计亮度的 ROI。`N` 即阱位总数，可由 `n_sites()` 读出。约定每行是一个 `(row, col)` 或 `(y, x)` 像素坐标对，务必与你后续画覆盖层、切 ROI 的取轴方式保持一致。

thresholds 占据判定阈值。它**既可以是形状为 `(N,)` 的逐阱位阈值数组，也可以是一个标量**。当它是 `(N,)` 数组时，每个阱位用自己的阈值（适合阱位间亮度不均匀的真实系统）；当它是标量时，所有阱位共用同一阈值（适合刚搭起来、还没逐位标定的快速起步阶段）。统计量超过阈值即判为“有原子”。

grid_shape 阱位的二维排布形状 `(ny, nx)`，或 `None`。若阵列本身是规则的二维网格（例如 `(5, 5)` 共 25 个阱位），设置它能让结果对象以二维方式聚合与作图（例如把占据率画成 `(ny, nx)` 的热图）；若阱位排布不规则，或你只关心一维序列，置 `None` 即可。注意 `ny*nx` 应与 `N` 一致。

roi_radius ROI 半径，整数（像素）。它决定以每个 center 为圆心 / 方心切出多大的区域来做亮度统计。

半径太小会丢光、信噪比差；太大则会把相邻阱位的光或背景纳入，造成串扰。它是探测灵敏度的关键旋钮之一。

reducer ROI 内像素的**归约方式**（把一片像素压成一个标量），取值为 `"mean"`、`"sum"`、`"median"`、`"max"` 之一。`"sum"` 对总光子数敏感、随 ROI 面积变化；`"mean"` 与面积无关、更稳健；`"median"` 抗热点 / 坏像素；`"max"` 对单点亮斑敏感。**reducer 一旦选定，阈值就是相对这个统计量定的——换 reducer 必须重新定阈值，否则判定全错（见排错节）。**

metadata 字典，记录标定的附带信息与来源标记。一个典型条目是 `\{"thresholds_calibrated": True\}`，表示这组阈值是真正测过的、而非占位的标量默认值。metadata 不参与探测计算，但对追溯“这份标定是怎么来的、能不能信”至关重要。

一句话记住四个旋钮

`centers` 决定**在哪测**，`roi_radius` 决定**测多大一块**，`reducer` 决定**怎么把一块压成一个数**，`thresholds` 决定**这个数多大算有原子**。四者环环相扣，改任一个通常都要回头校验另外三个。

11.1.2 方法清单

`n_sites()` 返回阱位数 N ，等于 `centers` 的行数。用于循环、分配结果数组、断言形状一致。

`detect(image)` 核心方法。输入一张二维图像，**用对象内已存的 `centers` / `thresholds` / `roi_radius` / `reducer`** 对每个阱位切 ROI、归约、与阈值比较，返回该帧的探测结果。它不接受额外探测参数——所有参数都来自对象本身，这正是“标定即配方”的体现：同一个 `TrapCalibration` 作用在任意图像上，行为完全确定、可复现。

`with_thresholds(thresholds, **metadata)` 返回一个**新的** `TrapCalibration`，其阈值被替换为传入的 `thresholds`，并可通过关键字参数合并进 `metadata`（例如 `with_thresholds(th, thresholds_calibrated=True)`）。它不就地修改原对象，便于在保留原始标定的同时派生出“刚标好阈值”的新版本。

`to_dict()` / `from_dict()` 在对象与普通 Python 字典之间互转。`to_dict()` 把所有字段序列化成可 JSON 化的结构；`from_dict(d)` 反向重建对象。它们是 `save/load` 的底层，也方便你手动检视或拼装标定。

`save(path)` 把标定写盘。**格式由扩展名决定**：`.json` 写成人可读的 JSON（便于 diff、手改、版本控制审阅）；`.npz` 写成紧凑的 NumPy 压缩包（体积小、读写快，适合大 N 或频繁存取）。

`load(path)` 从盘读回，按扩展名自动选择解析方式，返回 `TrapCalibration`。

11.1.3 schema 与存盘格式注意事项

- **选.json 还是.npz**：要让人读、要进 git、要手动核对，用 `.json`；要省空间、 N 很大、当作中间产物频繁存取，用 `.npz`。两者承载相同字段，可互换重建。
- `thresholds` 的多态性（标量 vs `(N,)` 数组）会被原样保存与恢复。读回后若要做逐元素运算，记得先判断它是标量还是数组。
- `grid_shape` 为 `None` 时表示“无网格语义”，序列化后仍是 `None`；不要用 `(N, 1)` 之类去冒充，那会触发二维聚合路径。
- `metadata` 里务必让来源标记诚实：阈值真标过就置 `thresholds_calibrated=True`，否则留 `False` 或不设。下游和排错都依赖这个标记判断标定是否可信。

Python

```

from core.calibration import TrapCalibration
import numpy as np

# 从零构造一份标定: 5x5 网格, 先用一个标量阈值起步
centers = np.array([[y, x] for y in range(5) for x in range(5)],
    ↪ dtype=float)
calib = TrapCalibration(
    centers=centers,          # (25, 2)
    thresholds=1200.0,       # 标量: 所有阱位共用, 起步用
    grid_shape=(5, 5),       # 规则网格 -> 结果可二维聚合
    roi_radius=3,            # 以每个 center 切 7x7 区域
    reducer="sum",           # 统计 ROI 内总计数
    metadata={"thresholds_calibrated": False}, # 诚实标记: 还没真正标阈值
)

print(calib.n_sites())      # 25

# 存成人类可读 JSON, 便于审阅 / 进版本库
calib.save("calib_startup.json")

# 读回完全等价的对象
calib2 = TrapCalibration.load("calib_startup.json")

```

Python

```

# 真正标好逐阱位阈值之后, 派生一份新标定 (不改原对象)
per_site_th = np.full(calib.n_sites(), 1200.0) # 实际由 thresholds
    ↪ 标定流程得到
calib_final = calib.with_thresholds(
    per_site_th,
    thresholds_calibrated=True, # metadata 同步置真
)
calib_final.save("calib_final.npz") # 紧凑格式存盘

```

11.2 结果对象与“覆盖层不改原图”不变量

实验过程中每一步都会产生一个**结果对象** (result object), 定义在 `core/results.py`。它们都是 notebook 友好的: 自带 `.plot` 用于即看即画, 并会**自动追加进** `exp.history`, 从而支持事后回放 (replay) 与导出。

11.2.1 结果对象家族

CaptureResult 一次相机采集的产物, 承载原始帧及其元信息, 是后续所有分析的起点。

SitemapResult 阱位定位 (sitemap) 的结果, 对应找出 `centers` 的那一步——把“光阱在图像哪里”固化下来。

ThresholdResult 阈值标定的结果, 对应把每个阱位的占据判定阈值定出来的那一步, 最终喂给 `TrapCalibration.thresholds`。

DetectionResult 一次探测 (detect) 的结果: 每个阱位的统计量与“有没有原子”的判定, 通常配合 `.plot` 把判定覆盖在图像上看。

DetectionTimeScanResult 随时间的探测扫描结果，对应 `detection_time(live=True)` 这类持续观测——把占据 / 计数随帧（时间）的变化聚成序列。

11.2.2 关键不变量：覆盖层永不改写原始图像

所有可视化里，**阱位圆圈等覆盖层（overlay）**都是画在 `matplotlib` 的坐标轴上，绝不修改底层的原始图像数组。这是一条必须牢记的不变量，原因有三：

1. **原始数据始终可信**：你看到的圈只是注释层，底下的像素永远是相机给的原值。任何复算、重标定、重判定都基于未被污染的数据，结果可复现。
2. **可反复重画而不累积副作用**：换 `roi_radius`、换 reducer、换阈值后重画覆盖层，不会因为“上次画的圈被烧进了图像”而出错。
3. **回放与导出安全**：因为 `exp.history` 里存的是干净数据 + 画法，事后从 history 重新出图、导出，得到的永远是一致的结果。

别去“擦掉”覆盖层

如果你想换一种画法，直接用结果对象的 `.plot` 重画即可——不要尝试在图像数组上“涂”或“擦”圈。覆盖层和数据是两层，分开的，这正是系统刻意保证的。

11.3 完整 notebook 实验流程

下面给出从连接设备到持续探测的标准 notebook 循环。会话入口与各子系统定义在 `session.py`。

11.3.1 会话与子系统总览

`connect(config, ...)` 返回一个 `NeutralAtomSession`（习惯命名为 `exp`）。它把硬件与逻辑分解成若干子系统：

`exp.devices` `DeviceSet`，底层设备集合。

`exp.camera` 相机句柄。

`exp.timing` `TimingSubsystem`，时序子系统。关键方法：`configure_imaging(exposure, load, trigger_width, pre_trigger)` 返回一条 `PulseSequence`；`preflight()` 返回 `PreflightReport`（其 `.raise_if_failed()` 会在时序不自洽时抛错）；`bind_pulse(pulse)` 返回 `PulseController`；`write_verilog(output_dir)` 导出 HDL。

`exp.readout` `ReadoutSubsystem`，读出子系统，封装 `sitemap / thresholds / save / detect / detection_time` 等高层动作。

`exp.sequence` 当前的 `PulseSequence`。

`exp.history` 结果对象列表，前述所有 result 自动追加于此。

11.3.2 `configure_imaging` 的四个参数

`timing.configure_imaging(exposure, load, trigger_width, pre_trigger)` 用来把一次成像的时序编出来，返回一条可绑定、可下发的 `PulseSequence`：

exposure 相机曝光时长。它必须与相机实际的曝光设置一致——这是最常见的错配来源（见排错节）。

load 装载 / 加载阶段时长 (把原子装进阱、稳态化的时间)。

trigger_width 触发脉冲宽度, 给相机的硬件触发信号有多宽。

pre_trigger 触发前导时间, 控制触发相对其他时序事件的提前量, 保证相机在曝光窗开始前已就绪。

11.3.3 标准采集循环 (可运行)

典型 notebook 流程是: **连接** → **配置成像时序** → **预检** → **定位阱位** → **标定阈值** → **存标定** → **探测** → **持续探测**。

Python

```
from session import connect

# 1) 连接, 拿到会话对象 exp
exp = connect(config)

# 2) 配置成像时序, 得到一条 PulseSequence
pulse = exp.timing.configure_imaging(
    exposure=20e-3,      # 与相机实际曝光一致!
    load=100e-3,
    trigger_width=1e-6,
    pre_trigger=5e-6,
)

# 3) 预检: 时序不自洽就当场抛错, 绝不带病往下跑
exp.timing.preflight().raise_if_failed()

# 4) 定位阱位 -> SitemapResult (确定 centers)
sitemap = exp.readout.sitemap()

# 5) 标定阈值 -> ThresholdResult (确定逐阱位 thresholds)
thresholds = exp.readout.thresholds()

# 6) 存标定, 落盘以便复用 / 审阅
exp.readout.save("calib_today.json")

# 7) 探测一帧 -> DetectionResult, 画出判定覆盖层
det = exp.readout.detect()
det.plot  # notebook 里直接出图: 圈画在坐标轴上, 原图数组不动

# 8) 持续探测 (实时) -> DetectionTimeScanResult
ts = exp.readout.detection_time(live=True)
```

有限帧采集: 别让 qCMOS 等死循环

做有限帧采集时, 正确姿势是**先 arm 相机, 再精确生成“恰好需要的那么多个触发”**。切勿让 qCMOS 相机去等一个 **repeat-forever (永远重复)** 的脉冲循环——那样相机会一直等下去而你拿不到确定数量的帧。要数得清几帧, 就发几个触发。

11.3.4 每一步产出了什么

- `sitemap()` 产出 `SitemapResult`, 其核心是 `centers`。

- `thresholds()` 产出 `ThresholdResult`, 其核心是逐阱位阈值, 对应把 `TrapCalibration.thresholds` 从标量升级为 `(N,)` 数组, 并应把 `metadata` 的 `thresholds_calibrated` 置真。
- `save(path)` 把当前读出标定写盘 (`.json` 或 `.npz`, 规则同 `TrapCalibration.save`)。
- `detect()` 产出 `DetectionResult`, 每个阱位一个统计量 + 一个布尔占据判定。
- `detection_time(live=True)` 产出 `DetectionTimeScanResult`, 把占据 / 计数随时间聚成序列, 适合盯加载、盯寿命。

11.4 扫描配合读出：一次扫描一帧一判定

把脉冲扫描和读出串起来, 可以做“扫一个参数、每个扫描点拍一帧、判定一次、最后聚成 1D/2D 结果”的实验。要点是**硬件无缝迭代扫描点, 每个扫描点恰好一个相机触发**。

流程是：用 `timing.bind_pulse(pulse)` 得到 `PulseController`, 配上一张扫描表 (`scan table`); 时序器会**无缝地 (seamlessly) 逐点迭代**扫描表, **每个扫描点产生一个相机触发**; 每帧用标定去 `detect`; 再把每个扫描点的占据 / 计数聚合成一维或二维结果。

每点一帧 扫描表有多少个点, 就有多少个触发、多少帧、多少次判定——一一对应。这正是有限帧采集“发几个触发拿几帧”原则在扫描场景下的体现。

无缝迭代 扫描点由时序器在硬件中连续推进, 不需要主机在点与点之间反复重配, 保证时序确定、节奏稳定。

聚合维度 若扫描是一维 (扫一个参数), 结果聚成 1D (占据率 / 计数随该参数); 若与 `grid_shape` 或二维扫描配合, 可聚成 2D。

Python

```
# 绑定脉冲, 拿到可下发扫描的控制器
ctrl = exp.timing.bind_pulse(pulse)

# 提供一张扫描表 (N_points 个扫描点; 具体构造见时序/脉冲章节)
# ctrl 会无缝迭代每个扫描点, 每点发一个相机触发
occupancy = []
for frame in run_scan_with_one_trigger_per_point(ctrl, scan_table):
    det = exp.readout.detect(frame)    # 用已存标定判定这一帧
    occupancy.append(det)              # 收集每点的判定

# 把逐点判定聚合成 1D/2D 占据 / 计数结果, 画出来
# (聚合后的结果对象同样会进入 exp.history, 可回放 / 导出)
```

别让相机干等

扫描循环里同样遵守**先 arm 相机、再发恰好 N_points 个触发**的原则。绝不要把相机挂在 `repeat-forever` 的脉冲循环后面等帧——扫描点是有限的, 触发数必须精确等于扫描点数。

11.5 排错清单

本节集中处理三类最常踩的坑：预检失败、曝光错配、标定过期。

11.5.1 预检 (preflight) 失败

`exp.timing.preflight()` 返回 `PreflightReport`, 调用 `.raise_if_failed()` 会在时序不自洽时抛异常。**务必在采集前调用并让它抛错**, 而不是跳过——它正是用来在你浪费一整轮采集之前, 把时序问题挡在门外。

- 看报告抛出的具体原因: 通常是 `configure_imaging` 的参数组合不自洽 (例如 `pre_trigger` 或 `trigger_width` 与 `exposure/load` 的时间窗冲突)。
- 修正 `configure_imaging` 的入参后**重新生成 pulse 并再次 preflight**, 直到通过。
- 不要用 `try/except` 吞掉 `raise_if_failed()` 的异常然后继续——那等于关掉了安全网。

11.5.2 曝光错配 (exposure mismatch)

`configure_imaging` 里的 `exposure` 必须与**相机端实际的曝光设置一致**。两边不一致是经典 bug:

- 症状: 图像偏亮 / 偏暗, 统计量整体偏移, 导致用旧阈值判定时占据率异常 (全有或全无)。
- 根因: 时序按一个曝光排、相机按另一个曝光拍, 光积分时间对不上。
- 处理: 核对相机配置里的曝光与传给 `configure_imaging` 的 `exposure`, 统一为同一值; 改了曝光后**阈值通常需要重标** (因为统计量随曝光整体缩放)。

11.5.3 换相机后标定过期 (calibration staleness)

标定是和具体相机、具体成像条件强绑定的。**一旦换了相机** (或显著改了光路、增益、曝光), 原来的 `TrapCalibration` 就可能过期:

- `centers` 可能失效: 不同相机的像素映射 / 视场 / 取向不同, 阱位在图像里的位置会变, 旧 `centers` 切到的 ROI 可能根本不对准阱位。
- `thresholds` 必然需要重标: 增益 / 量子效率 / 噪声不同, 统计量的绝对尺度变了, 旧阈值的判定不再可信。
- `reducer` 与 `roi_radius` 的合适取值也可能随新相机的像素尺度变化——别假设照搬就行。
- **用 metadata 自查**: 检查 `metadata["thresholds_calibrated"]`。若为 `False`, 说明阈值还是占位值, 不可用于正式判定; 换相机后应把它视为 `False`, 重新走 `sitemap` → `thresholds` → `save`。

换相机后的标准复位动作

换相机后请按顺序重做: `configure_imaging` (用新相机的真实曝光) → `preflight().raise_if_failed()` → `readout.sitemap()` (重定 `centers`) → `readout.thresholds()` (重标阈值, `metadata` 置真) → `readout.save()` (覆盖旧标定)。跳过任何一步都可能让后续判定静默地错。

11.5.4 快速自检表

1. 采集前是否调用了 `preflight().raise_if_failed()` 且通过?
2. `configure_imaging` 的 `exposure` 是否等于相机实际曝光?

-
3. `thresholds` 是标量还是 `(N,)` 数组? `metadata["thresholds_calibrated"]` 是否为真?
 4. 改过 `reducer` 或 `roi_radius` 后, 阈值是否重标过?
 5. 有限帧 / 扫描采集是否做到了“先 arm、再发恰好需要的触发数”, 而非让 qCMOS 等 `repeat-forever` 循环?
 6. 换过相机 / 光路后, 是否重跑了 `sitemap` → `thresholds` → `save`?

12

修改指南

12.1 我要加一台自定义设备

实现对应的类型契约 (`CameraDevice/SequencerDevice/TrapArrayDevice` 之一) , `na.register_device_class("Name", cls)` 注册, 然后在配置 JSON 里用 `type: "Name"` 引用。设备只负责硬件动作; 标定、检测算法属于 `core/`, 不要塞进设备类。

12.2 我要换标定的 reducer 或网格顺序

`reducer` 和 `ordering` 决定了计数与格点编号; 阈值是针对它们学的。换了就要重新 `sitemap + thresholds`, 别让训练用一个 `reducer`、检测用另一个。建议把 `reducer/ordering` 记进 `TrapCalibration.metadata` 并在检测时校验。

12.3 我要改本手册

正文模板在 `Zou_lab_control/neutral_atom/content/manual_templates/device_manual_zh.texbody`, 构建入口是 `build_device_manual()` (`Zou_lab_control/neutral_atom/notes.py`)。本手册用内嵌 TikZ 图, 无外部图依赖, 改完直接重建 PDF。